

Wie verwendet man den EpiPen®?



Faust um den EpiPen®
formen, danach den
blauen Deckel abnehmen.




Bein ruhig halten und **oran-
ges Ende** an die äussere
Mitte des Oberschenkels
setzen (mit oder ohne Klei-
dung).



Kräftig stossen, bis die
Nadel eingedrungen ist (man
hört bzw. fühlt es) und 3
Sekunden ruhig halten.

Notruf 144 wählen

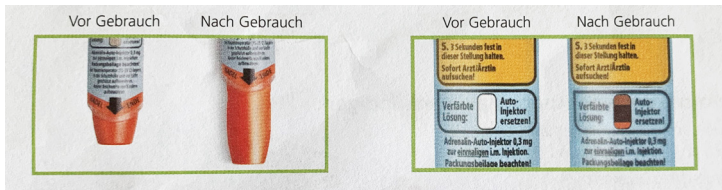

Nach der Injektion wird automatisch ein **Nadelschutz** ausgefahren und das Sichtfenster verdunkelt sich. So kann ein **benutzer** von einem **neuen EpiPen®/ Epi-Pen® Junior** unterschieden werden.

Notruf 144 und sich abfragen lassen

ODER

- > Name und Aufenthaltsort nennen
- > Grund des Anrufs nennen: Kind oder Erwachsener mit allergischem Schock wegen...
- > jetzt beginnende Symptome nennen
- > Notarzt wird benötigt
- > nicht auflegen, Bestätigung abwarten (Gespräch wird von der Leitstelle beendet)



Video zur Verwendung des EpiPens®
<http://bit.ly/2FGAhYP>